


# Les 2 Klauwverzorgen


- Pedicuurschema onderhoud
- Klosje plakken
- Klosje verwijderen
- Materialen
- Scherp maken
- Afspraken groepsindeling
- Video klauwverzorgen

# Pedicuurschema onderhoud

1. *Knip binnenklauw op lengte (7.5 cm. Laat de punt van de binnenklauw 5 mm dik.*  
*Spaar het balgebied.*
- 2 *Maak de buitenklauw even lang en hoog als de binnenklauw. **(indien mogelijk)***
- 3 *Maak het model in de klauwen.*

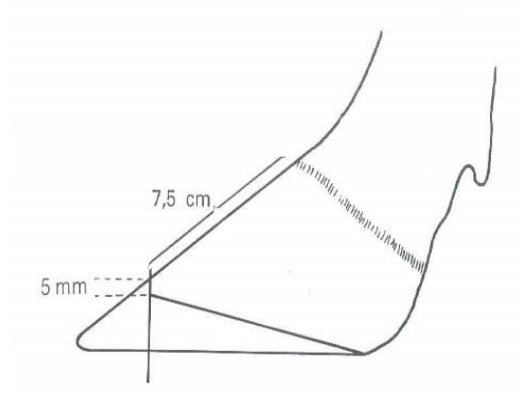


# Pedicuurschema onderhoud

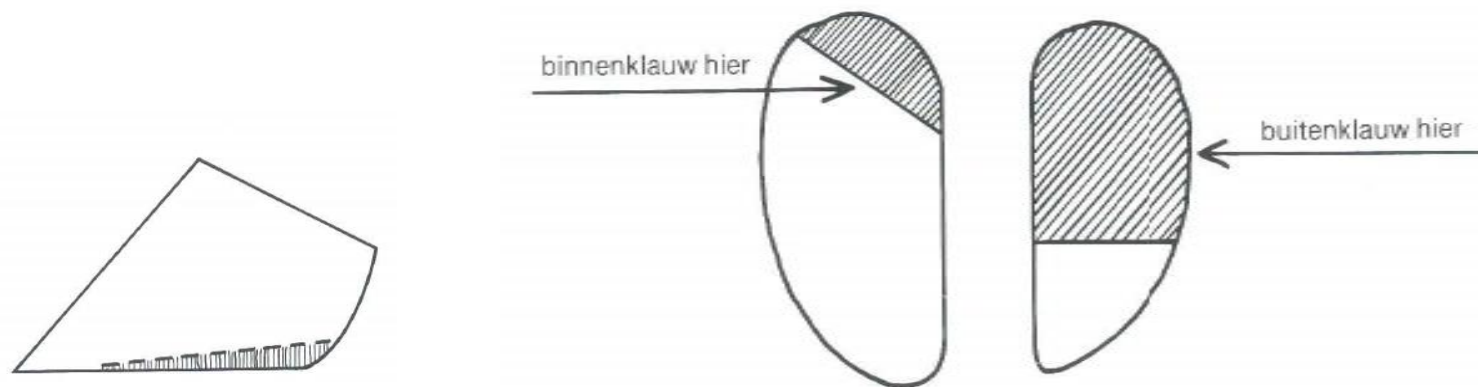

- **Behandeling klauw aandoeningen:**
  4. *Snij klauwziektes weg (als het kan!)*
  5. *Verwijder het losse hoorn.*

# Waarom klauwblokjes?

- Waarom:
  - ontlasting van de zieke klauw
  - te weinig hoogteverschil tussen ziek en gezonde klauw

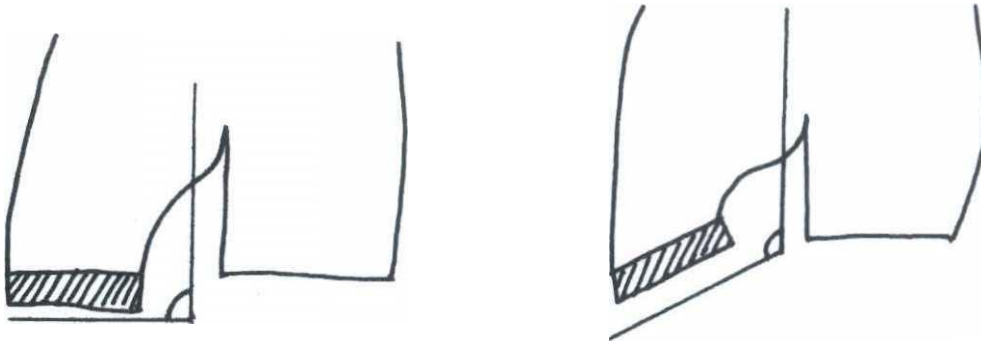


# Klosje plakken

- **Eisen aan de klauw:**
  1. Vlak draagvlak
  2. Geen ernstige defecten
  3. Zooldikte niet te dun
- **Systemen van klosjes aanbrengen:**
  1. Lijmen
  2. en spijkeren

# AANBRENGEN VAN KLOSJE D.M.V. LIJMEN

1. klauw dient ruw en droog te zijn
2. Kerven
3. Lijm maken
4. Lijm aanbrengen op klosje en zool
5. Klosje goed aandrukken en lijm op de wanden aanbrengen
6. Als heet geworden lijm gaat afkoelen, koe laten lopen

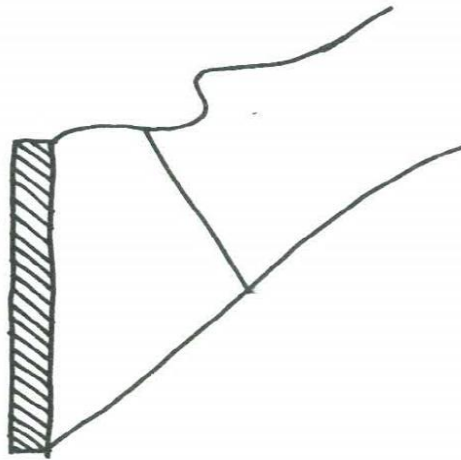

# Afnemen klosje

- Na 4 tot 7 weken
- Na blokje afhalen, het scheef gelopen draagvlak pedicuren
- De herstellende klauw pedicuren in het zieke gedeelte

# Onderhoud van klauwverzorgingsmessen

- **Benodigheden:**
- wetsteen —> tyrolyt ca. 7,5 cm lang, 1,5 cm breed.
- ronde vijl, plankje met polijstpapier.
- of
- rubber polijstschiif en schuurband en katoenen schijf



# Onderhoud van klauwverzorgingsmessen

## Werkwijze:

- **voorkant** met wetsteen met water of olie slijpen:
  - 1e rode kant.
  - 2e witte kant.
  - draaiende slijpbeweging **tegen** de snijrichting (hoek max. 30 op het mes).
- **achterkant** met wetsteen:
  - steen vlak op het mes.
- **boog scherp** maken met ronde vijl:
  - draaiende beweging **tegen** de snijrichting in.
  - polijsten met fijn schuurpapier.
- Na gebruik mesjes schoon en droog maken en daarna invetten!

# Materialen

- Links en/of rechts kopen?
- Alle messen zijn voorgeslepen.
- Goede messen:
  - esculaap: smal €21,- (bruin)
  - breed - 13,- (zwart)
  
  - hauptner: smal - 22,40
  - breed - 21,50
  
  - mindere messen: brosius heel zacht - ??????
  - bekapmes WOPA - 8,50
  - stootmes - 32.40

# Materialen

- tangen:
  - roestvrij stalen tang - 88,-
  - hefboomtang met overbrenging - 52,50
  - hoeftang eenhands model - 57,50
- slijpen:
  - wetsteen (tyrolyt) - 12,00
  - rubberpolijstschiif - 33,-
  - slijpmachine WG1750 -310,-
- houtprothese
  - Techno vit (12 st) - 75,-
  - Demotec-90(12st.) - 70,-
  - Demotec-95(14st.) - 85,-
  - Demotec-Easy bloc (12 st) - 85,-
- behandelboxen:
  - SA0018 - 995,-
  - SA0022 -1150,-

# Materialen

- <http://www.wopa.nl/>